



Kommunikationssystem

DUO system 3.0 er et trådløst kommunikationssystem, der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at høre og deltage i samtaler og er velegnet til fx møder, restaurantbesøg og undervisning. Derudover kan systemet benyttes sammen med eksterne lydtilknyttede fx tv, computer og smartphone.

Kommunikationssystemet kan med fordel anvendes af personer både med og uden høreapparater.

Det består af en sender og en modtager. Senderen har to mikrofonindstillinger – en omni og en retningsbestemt indstilling. Senderen tilpasser automatisk sine mikrofonindstillinger alt efter, hvordan senderen placeres.

Modtageren har en indbygget mikrofon, som aktiveres ved at holde modtageren i vandret position.

Bruges kommunikationssystemet sammen med høreapparater, anbefaler vi, at det anvendes sammen med den medfølgende halsteleslynge, da lyden således sendes direkte til høreapparaterne og bliver mest optimal.

Sender



Specifikationer

Frekvensområde	2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	2 (omni og retningsbestemt)
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Plymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	2 timer
Batterilevetid	14 timer
Lydindgang	Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	47 g

Modtager



Specifikationer

Frekvensområde	2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering
Audio frekvensområde	100 Hz - 8.000 Hz
Feltstyrke	12 dB re. 400 mA/m, IEC118-4
Rækkevidde	Op til 20 meter
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Plymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	2 timer
Batterilevetid	14 timer
Lydindgang	Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydudgang	3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	47 g

Pakkens indhold (098-52-010-00)

Sender med halssnor og silikonecover

Modtager med halsteleslynge

Usb-ladekabel


Strømforsyning

Audioledning til tv, computer m.m.

Opbevaringstaske

Brugervejledning

Tilbehør

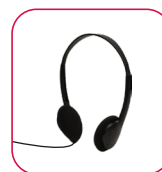

890-88-633-00
Standard
hovedtelefon