

UNO system 4.0



Kommunikationssystem

UNO system 4.0 er et trådløst kommunikationssystem, der giver personer med nedsat hørelse mulighed for at høre og deltage i samtaler fx til møder, foredrag, sociale arrangementer og ved restaurationsbesøg. Derudover kan systemet sende lyden fra tv'et direkte til brugerens høreapparater – og det giver en unik mulighed for at kunne føre en samtale samtidig med, at der lyttes til en tv-udsendelse.

UNO system 4.0 består af en X40 Transceiver 4.0 og en T50 Transmitter 4.0.

Mikrofonen i UNO system 4.0, X40 Transceiver, kan bruges som bordmikrofon i enten omni- eller retningsbestemt mikrophonindstilling, eller den kan bæres om halsen, fx af en samtalepartner eller foredragsholder.

T50 Transmitter installeres til den lydkilde, man gerne vil høre, fx tv'et, og parres med X40 Transceiver. Når man vil se tv, tændes der blot for tv'et, og lyden fra tv'et sendes via X40 Transceiver til høreapparaterne eller de trådløse hovedtelefoner. Som en helt unik funktion kan man hurtigt med et enkelt tryk på X40 Transceiver mute lyden fra tv'et, og lyden fra en samtalepartner kan nu høres. Trykkes der en gang til på X40 Transceiver, vender lyden fra tv'et tilbage, hvilket gør det nemt at føre en samtale, mens man ser tv.

X40 Transceiver kan benyttes med kompatible høreapparater og kompatible enheder med Auracast™, fx trådløse hovedtelefoner og høreapparater*.

* Find information om kompatibilitet på www.phonicear.dk

 **AURACAST**
A BLUETOOTH® TECHNOLOGY

Auracast™ ordmærket og logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG. Enhver brug af sådanne mærker foregår under licens til Phonic Ear. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum

Tlf.: 4445 2530
www.phonicear.dk
mail@phonicear.dk

X40 Transceiver 4.0



Radiotransmission	Bluetooth® Low Energy, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, frekvenshåndtering
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Trådløs opkobling	Til kompatible høreapparater og hovedtelefoner
Rækkevidde	Op til 20 meter
Mikrofonindstillinger	Omni, retningsbestemt og mute
Batteri	Indbygget genopladeligt Litium Polymer 3,7 V, 700 mAh
Opladningstid	Op til 2 timer
Batterilevetid	12 timer
Lydindgang 1	Linjeindgang: Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Lydindgang 2	Mikrofonindgang: 4-polet 3,5 mm jackstik CTIA standard
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

T50 Transmitter 4.0



Radiotransmission	Audinor proprietær RF, 2,4 GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvensstyring
Frekvensområde	100 – 8.000 Hz
Rækkevidde	Op til 20 meter
Lydindgang	Magnetisk stik til 3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning	5 V DC/2000 mA
Mål (hxbxd)	90 x 45 x 12 mm
Vægt	46 g
Materiale	ABS plast

Pakkens indhold (90060126)

X40 Transceiver med halssnor og sandfarvet silikonecover

Usb-ladekabel med magnetisk stik

Audiokabel med magnetisk stik og 3,5 mm jackstik

T50 Transmitter med gråt silikonecover

Audiokabel med magnetisk stik, usb-stik og 3,5 mm jackstik

Strømforsyning til usb-ladekabel

Filttaske lille

Brugervejledning

Tilbehør



90060138
Usb-ladekabel
med
magnetisk stik



90060143
Strømforsyning
til usb-lade-
kabel




90060139
Audiokabel
med magnetisk
stik og 3,5 mm
jackstik



90060142
Audiokabel
med magnetisk
stik, usb-stik
og 3,5 mm
jackstik



90060137
Halssnor

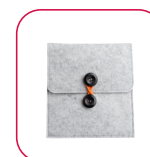

90060131
Filttaske lille



90060140
Silikonecover
i sandfarve



90060141
Silikonecover
i grå