

MA 1

Das Leichtgewicht unter den Hörscreenern

Klein und praktisch

Mit dem MA 1 erhalten Sie unser leichtestes Luftleitungs-Hörscreening-Gerät. Wie eine Fernbedienung passt es genau in Ihre Handfläche und ermöglicht es Tests und Einstellungen mit nur einer Hand durchzuführen.

Ideal für schnelle Hörtests

Mit dem MA 1 senden Sie Reinton-Signale nacheinander an ein Ohr. Das dynamische Spektrum reicht von 15 bis 50 dB HL in Pegelschritten von 5 dB. Der handliche Hörscreener bietet Ihnen Testfrequenzen von 500 bis zu 4000 Hz und ist mit einem DD45 Kopfhörer ausgestattet.

Wenn das MA 1 in einer geräuschintensiven Umgebung verwendet wird, empfehlen wir den optionalen Luftleitungskopfhörer DD65 v2 mit Schallschutzkappen.

Lange Batteriebetriebszeit

Das MA 1 wird von zwei alkalischen Batterien betrieben. Bei Inaktivität, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Betätigen Sie einfach eine beliebige Taste um es wieder einzuschalten.

Auf einen Blick:

- Tragbarer Luftleitungs-Hörscreener
- Einfache Einhandbedienung
- Außergewöhnlich leicht
- Test-Frequenzen: 500, 1000, 2000 und 4000 Hz
- Reinton-Signal von 15 dB HL bis 50 dB HL
- Batteriebetrieben (2 AA-Batterien)
- Automatische Abschaltung
- Luftleitungskopfhörer DD45
- Optionaler Luftleitungskopfhörer DD65 v2 mit Schallschutzkappen



Technische Daten des MA 1

SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS MA 1

Testsignal	Reinton (Dauerton)
Testfrequenzen	500, 1000, 2000 und 4000 Hz
Pegelstufen	5 dB
Pegelbereich Luftleitung	15 dB HL to 50 dB HL
Genauigkeit	± 4 dB
Verzerrung	weniger als 3%

GERÄT ALLGEMEIN

Abmessungen	B x T x H: 6,4 cm x 15,3 cm x 2,3 cm
Gewicht	115 g (nur Gerät und Batterien)
Stromversorgung	2 AA-Batterien
Batterielebensdauer	6 Monate, abhängig von der Batterieselbstentladung

STANDARDS

Sicherheit	IEC 60601-1:2012 Typ B Anwendungsteile
EMC	IEC 60601-1-2:2014
CE 0123	Klasse IIa gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745
Audiometer-Klasse	Das MA 1 ist nicht nach der Norm EN 60645-1 klassifiziert und ist mit dieser Norm nicht konform.

STANDARDZUBEHÖR

- LL-Kopfhörer DD45
- Gerätehalter
- 2 AA-Batterien

OPTIONALER WANDLER

- LL-Kopfhörer DD65 v2 mit Schallschutzkappen


Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.



Standard Zubehör



MA 1 Gerät

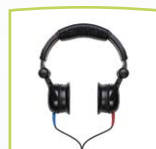

LL-Kopfhörer DD45

Optionaler Wandler



LL-Kopfhörer DD65 v2

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Deutschland
Tel.: +49 30/70 71 46-50 · Fax: +49 30/70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz



Finden Sie den für Sie zuständigen Händler.

